

راهنمای خلاصه شده قلم نوتروپین آک (NutropinAq® Pen)

میخواهی
رشد کنی؟



این راهنما به تو کمک می‌کند تا نوتروپین آک-پن
(NutropinAq® Pen) را درست مصرف کنی

شگردهای زیر برای آماده سازی قلم نوتروپین تو در اولین تلاشت به کار میروند - پدر و مادرت به تو کمک میکنند.

آماده سازی قلم / جا گذاری یک آمپول نو

۱ سرپوش سبز را از قلم در بیاور و نگهدارنده آمپول را بیچان و آن را بیرون بیاور.

۲ دکمه بازنشاندن سفید را فشار بده.



۳ دکمه دوز سیاه را در جهت عکس عقربه های ساعت بگردان تا این که دیگر جلوتر نرود.



۴ حالا دکمه دوز سیاه را خیلی کم در جهت عقربه های ساعت بگردان، تا این که صدای اولین کلیک به گوش برسد و دکمه دوز سیاه را بگردان تا قفل شود. شاخص دیجیتال دوز حالا باید ۲ خط تیره نشان بدهد.



۵ حالا آمپول نوتروپین NutropinAq® را در نگهدارنده آمپول فرو کن و آمپول پر شده را در قلم پیچ کن.



وقتی که آمپول در قلم گذاشته شده باشد همه چیز آسان است. برای تزریق روزانه فقط مراحل ۶ تا ۱۲ را تکرار کن!

▲ دوز خود را با گرداندن دکمه دوز در جهت عقربه های ساعت تنظیم کن. اگر به دوز بالاتری رفتی، دکمه سیاه دوز را بگردان تا به دوز صحیح برسی.



۱ دکمه باز نشان دادن سفید را فشار بده.



تام برای تو به طور آنلاین توضیح می دهد که چگونه از NutropinAq® Pen به طور صحیح استفاده کنی.



www.wirwollenwachsen.com



تنظیم دوز

▼ وقتی برای اولین بار از آن استفاده میکنی، شاخص دوز دیجیتال از دو خط تیره به یک شاخص چشمک زن با 0,0 mg میپرد. وقتی که آمپول قبلا در حال استفاده بوده باشد، دوز مربوط به روز قبل به صورت چشمک زن ظاهر میشود؛ صفحه تصویر به 0,0mg میپرد. اکنون میتوانی دوز را تنظیم کنی.



راهنمای خلاصه شده

تزریقها

۱۱ پوست را روی هم فشار بده و نک قلم را روی آن بگذار. وقتی که راهبر سوزن را به کار میبری قلم را به پایین فشار بده تا این که راهبر سوزن روی هم فشرده شده و سوزن پوست را سوراخ کند. اگر نه، سوزن را مستقیماً به داخل پوست بکن. دکمه دوز را به آرامی فشار بده تا این که قفل شود و ۱۰ ثانیه صبر کن. سپس میتوانی از قلم استفاده کنی.



۹ حاله درپوش لاستیکی را با یک پارچه الکلی پاک کن. یک سوزن جدید را به قلم پیچ کن و هر دو سرپوش را با احتیاط از سوزن بیرون بکش.



راهبر سوزن


۱۲ انجام شد! حالا باید سوزن را دوباره با پیچاندن باز کنی، سرپوش را سر جایش بگذاری و قلم را در جعبه اش در یخچال قرا دهی.



۱۰ میتوانی قلم را با یا بدون راهبر سوزن به کار ببری. راهبر سوزن، سوزن را در موقع تزریق میپوشاند و تو را از صدمه در امان میدارد. راهبر سوزن را روی قلم قرار بده و هر دو دکمه را به جلو ببر.



اجزا

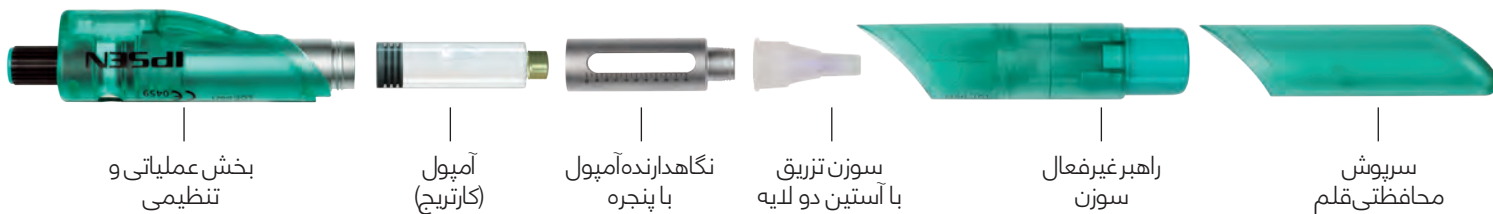

شاخص دوز (مقدار دارو) دیجیتال



دکمه دوز سیاه



دکمه باز نشانیدن (ریست) سفید

قلم نوتروپین آک (NutropinAq® Pen) مخصوص تزریق نوتروپین آک NutropinAq® درست شده است.

قلم نوتروپین آک (NutropinAq® Pen) خود را بدون راهنمایی گرفتن از یک شخص آموزش دیده به کار نبر. اگر با قلمت مشکل داشتی به شخصی که آن را برایت شرح داده مراجعه کن.

در اینجا قلم نوتروپین آک (NutropinAq® Pen) خود را برای تزریق در بدنت آماده میکنی.

محل تزریق را باید هر روز عوض کنی.

به این ترتیب پوست بدنت صدمه نمی بیند، چون روزهای پشت هم در همان محل تزریق نمیکنی.



تزریق در ناحیه شکم، زیاد به ناف نزدیک نباشد

تزریق در ران

-  قلم و آمپول (کارتريج) را دور از روشنائی در یخچال نگهداری کن (به هیچ وجه نگذار یخ بزنند!). محلول موجود در آمپول در دمای تا 8°C تا 28°C روز پس از شروع مصرف ثبات دارد.
-  قلم و آمپول را میتوان تا ۴۵ دقیقه پیش از مصرف از یخچال بیرون آورد.
-  پیش از هر تزریق دستهایت را به خوبی با آب و صابون بشوی.
-  از سوزن فقط یک بار استفاده کن.
-  بین تزریقها آمپول را از قلم بیرون نیاور.
-  برای پاک کردن قلم از یک دستمال نمدار استفاده کن - به هیچ وجه آن را در آب فرو نبر و از الکل استفاده نکن.
-  برای تمیز کردن آمپول آن را با الکل پاک کن.

نکته: در روزهای دارای تاریخ زوج در طرف راست و در روزهای دارای تاریخ فرد در طرف چپ تزریق کن.

NUT-AT-000233